

SLEE CUT 回転式マイクローム

<特長>

パラフィン切片および、研究、プラスチック、工業用の標準装置
試料サイズは、いずれか選択可

- 標準試料クランプタイプで最大50mm x 50mm
- ユニバーサルカセットクランプタイプの標準カセットサイズ
- フォイルクランプ

CUT 4062 : 手動式

- 戻りストロークの自動微細調整
- トリミングは、4段階の切り込み機能(10、20、30及び40 μm)

CUT 5062 : 半自動式

手動型に加えて更に簡易な操作性を実現

- トリミング厚設定は、300 μmまで任意にプログラム可能
- リトラクション: 0~200 μm まで任意にプログラム可能
- 自動2速前進による切断

CUT 6062 : 全自動式

基本的な特長を残しつつ、手動式や半自動式に加えて
更に簡易な操作性を実現

- モーター駆動
- フットスイッチ
- パネル操作による電動切断
- 個々、又は連続した切断が可能
- 20~300mm/secで 任意にプログラム可能な切断速度
- 試料最終位置選択可能(上部又は下部)
- リトラクション: 0~200 μm まで任意にプログラム可能
- 緊急停止ボタン



| 型番 | OSK 38SL100 | OSK 38SL101 | OSK 38SL102 |
|-------------|--|--|----------------------------|
| 販売名 | SLEE CUT4062 | SLEE CUT5062 | SLEE CUT6062 |
| 医療機器製造販売届番号 | 13B2X10157000036 | 13B2X10157000037 | 13B2X10157000038 |
| 切片厚設定範囲 | 0.5 ~ 60 μm | 0.5 ~ 100 μm | |
| 切片厚選択値 | 0 ~ 2 μm - 0.5 μm刻み 2 ~ 10 μm - 1.0 μm刻み 10 ~ 60 μm - 2.0 μm刻み | 0 ~ 2 μm - 0.5 μm刻み 2 ~ 20 μm - 1.0 μm刻み 20 ~ 50 μm - 2.0 μm刻み 50 ~ 100 μm - 5.0 μm刻み | |
| トリミング厚 | 10/20/30/40 μm | 0~300 μm, 任意にプログラム可能 | |
| 試料水平移動 | | 28mm | |
| 試料垂直移動 | | 60mm | |
| 試料オリエンテーション | | XY軸:8° / Z軸:360° | |
| 切断速度 | - | 自動2速前進 | 20~300mm/sec 任意にプログラム可能 |
| セクションカウンター | ストローク(オプション) | ストローク/距離 | |
| サイズ | | 610D x 480W x 350H mm | |
| 重量 | 33kg | 33kg | 34kg |

医療機器製造販売業許可番号13B2X10157

オガワ精機株式会社

〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル

TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373,9952


Email : sales@ogawaseiki.jp

website: www.ogawaseiki.jp

OSK オガワ精機株式会社


刃の交換が簡単なナイフホルダー

刃は使い捨て式。清潔かつ鋭い切れ味で迅速な作業を確実にします。

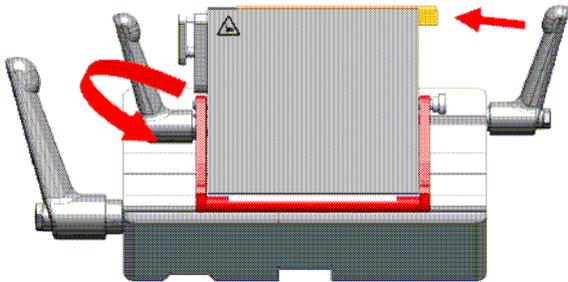


ナイフホルダーの精密な位置調整

水平方向への精密な調整が可能でサンプルの切断面調整を確実にします。

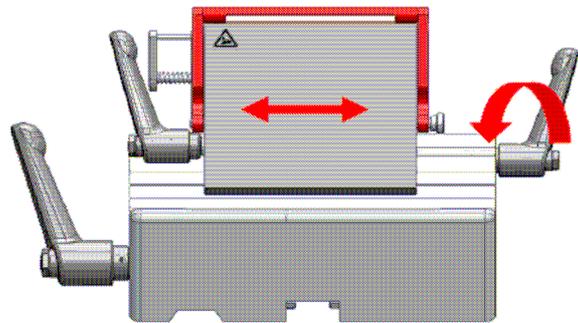


切断角度の調整

サンプルの迅速な凍結・組織の構造の保存及び凍結資料の水平化が実施可能となる器具です。

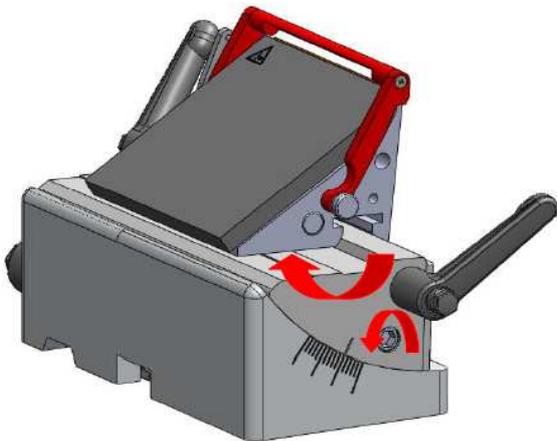



手動及び自動切断

全てのグレードに手動ハンドルを搭載。微細な試料切断を可能にします。


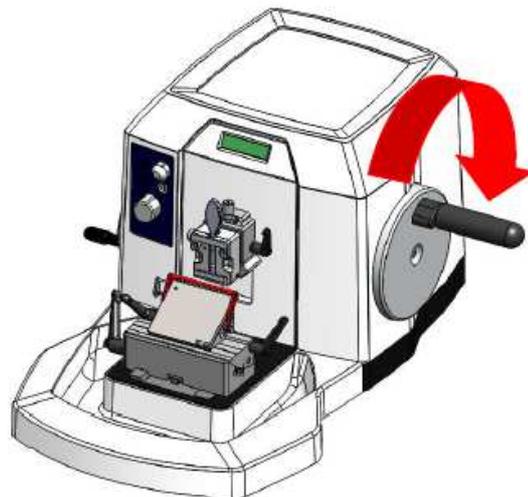


SLEE CUT 回転式マイクローム

外寸法図

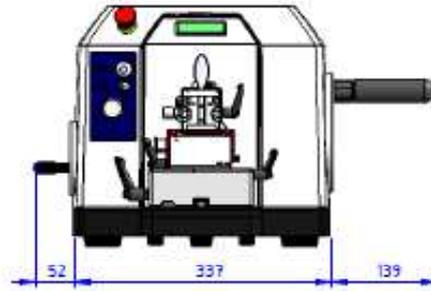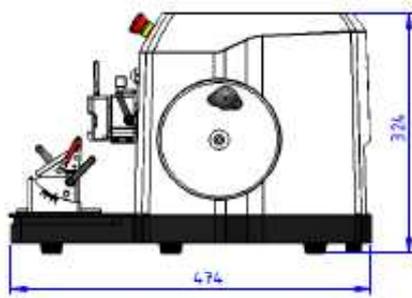

CUT 4062

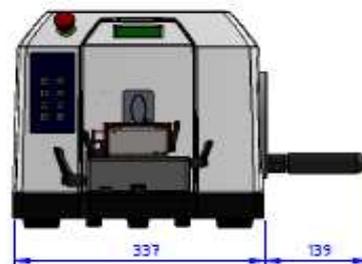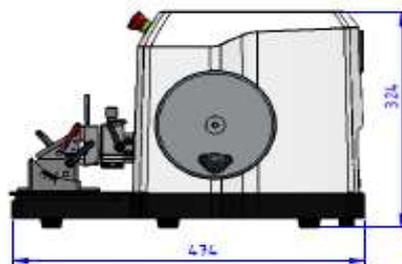

CUT 5062


医療機器製造販売業許可番号13B2X10157

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社
〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル
TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373,9952
Email : sales@ogawaseiki.jp
website: www.ogawaseiki.jp

SLEE CUT 回転式マイクローム

外寸法図

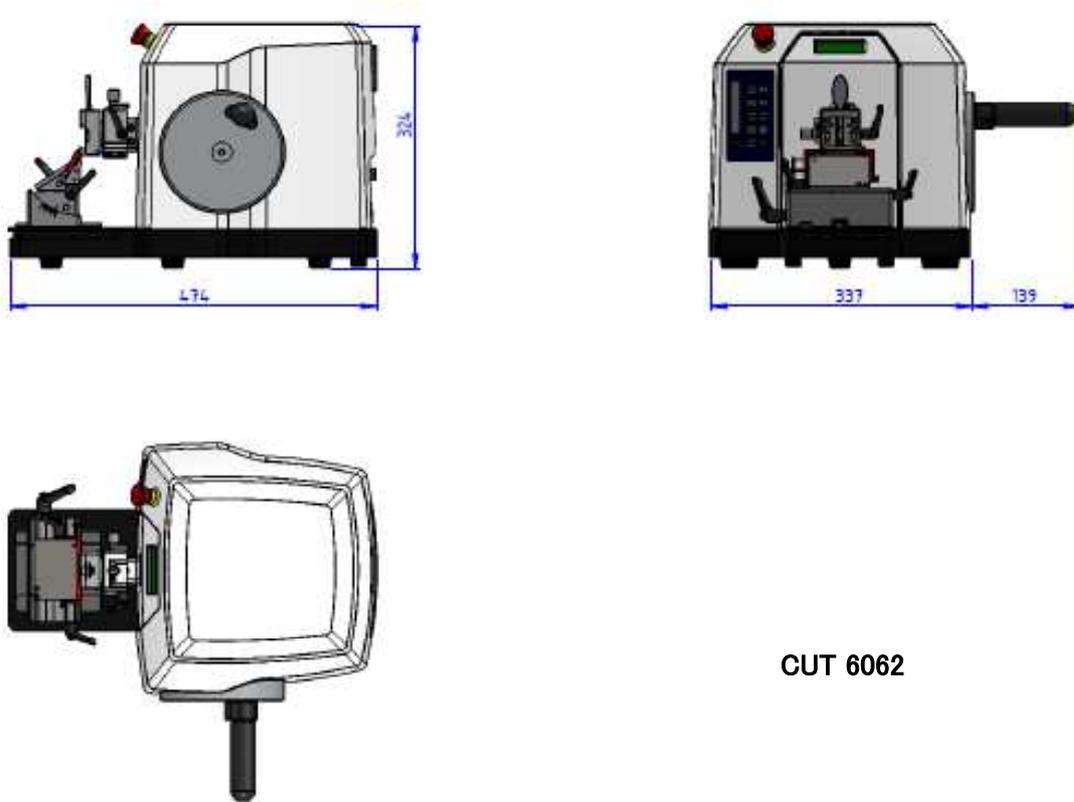

CUT 6062

※仕様は予告なく変更となることがございます。

SLEE medical
an orgentec company

医療機器製造販売業許可番号13B2X10157

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社
〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル
TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373,9952
Email : sales@ogawaseiki.jp.org
website: www.ogawaseiki.jp.org