

美容クリニックの診療・手術のニーズを合わせたスタイリッシュなモデル ポータブルサージカルベッド エレガントチェア

エレガントチェアのおすすめ点



高い操作性

- 美容クリニックの診療・手術に対応した多機能多彩なデザイン
- 2次元および縦方向に調整可能な多機能ヘッドレスト
- 4つのポジションメモリー機能、自動実行機能、リセットボタンを備えた操作コントローラ
- On/Offスイッチ、3つのポジションメモリー、リセットボタン、背もたれ、シート、角度および高さ調整操作できるフットコントローラ(操作しやすい足位置に移動可)
- 緊急停止ボタンが付きの蓄電バッテリー(電源コードなしで使用)



移動しやすさ

- モノリフト設計により患者最大体重 200 kg
- 2個の中央制動ステアリングキャスターと2個の固定タイヤを備えた強固な移動ギアで、安定性のある移動が可能
- 便利な押しハンドル付きで滑らかに動くキャスター



簡単設置

- 無煙炭の快適な室内装飾 F6461197 標準シールド
- クッションが簡単着脱
- 快適なアームレスト、取り外し可能
- 各部位にアクセスしやすく、メンテナンスしやすい設計



オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-2-9 22 山京ビル
Tel: 03-3200-0234 Fax: 03-3200-0373

<2018年10月より問合せ先>
オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11
Tel: 03-6908-5257 Fax: 03-6908-5258
Email: osk.medical@mint.ocn.ne.jp

UFSK-International
OSYS GmbH





緊急停止ボタン付き蓄電バッテリーボックス



操作しやすい位置移動可能フット操作コントローラ。On/Off ボタン、3ポジションメモリ機能、リセットボタン、背もたれ、座位、高さ調節操作



2次元および縦方向調節可能多機能ヘッドレスト



ハンドコントローラで多機能操作。自由設定可能4ポジションメモリ自動操作機能、On/Off スイッチ、リセットボタン等



フットレストにあるハンドル移動時押しハンドル



中央制御の2つのステアリングキャスター

多機能装備のエlegantチェアー



操作コントローラホルダー
(オプション)

ハンド/フット操作コントローラからサーボモーター駆動で各部位がスムーズ動作し位置調整できます

ヘッドレストと背もたれ用
ノームレール(オプション)

外枠はステンレススチール製

停止時も移動時も安定設計



操作しやすい位置移動可能な多機能フット操作コントローラ

エレガントチェアの便利なアクセサリー



パッド付きアームレスト
ユニバーサルジョイント、
手首固定ストラップ付



バックアップ用バッテリー



サイドレール
左右可動・ロック、布張り



レール付手術ドレープ掛ロッド、
酸素吸入器接続クランプ有



レール付手術ドレープ掛ロッド、
酸素吸入器接続クランプ無



モニターアームステンレススチール
伸縮可能 I.V 用ポール付
φ 25mm



付属品取付けサポート
ステンレス製



器械台
15×30×1.5 高さ調節、回転、
着脱可 取付けアダプター付



脚部保護レール
(移動時押しハンドル)



埋め込型ヘッドクッション



座部脚部の保護クッション



予備ハンドル
両側 2 個一対



ハンドコントローラホルダー



ハンドコントローラホルダー
IV ポール搭載用



スチール製 IV 用ポール
φ 25/18mm
片手高さ調整可 1070-1660mm
4フック、最大荷重 2kg




補助レール 300mm
(座位用)



補助レール
(背もたれ用)



保護カバーシート
(使い捨てタイプ)

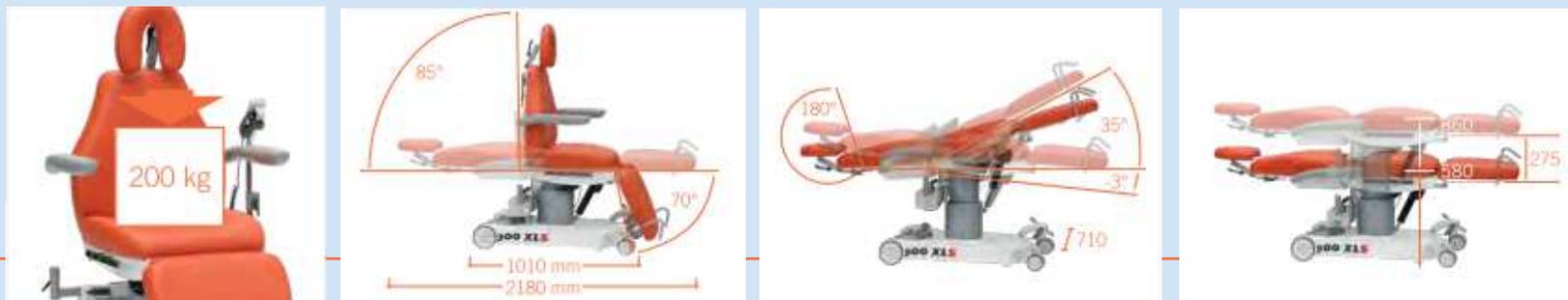

エレガントチェア仕様一覧

外枠

- 外枠	60 x 30 mm
- 外枠長	1,010 mm
- 外枠幅	710 mm
- アーム込幅	830 mm
- 白ペイント仕上げ	
- 中心ブレーキ 両側からアクセス可能	
- 2個のダブルキャスター	φ 100 mm
- 2個の固定キャスター	φ 150 mm
- フットコントローラ(移動可能)	
背もたれ/座位/脚部位置調整操作、高さ調整操作、リセットボタン、自動操作機能、3ポジションメモリー	
- 緊急停止ボタン	
- 等電位ボンディング接続	

- 幅	610 mm
- アクセス高さ	580 mm
- 取外し可能クッション	
- ツンドラスカイカラー	色見本参考

	荷重	角度	サイズ
- ヘッドレスト	10 kg	0 </+180°	
- 背もたれ	80 kg	0 </+85°	<610 x 610 mm
- 座位	75 kg	-3 </+35°	<510 x 605 mm
- 脚部	35 kg	0 </+70°	<490 x 525 mm
- 高さ調整	200 kg		from 580-860 mm
- アームレスト	30 kg ea	0 </+180	<455 x 75 mm

電気制御

IPX4 準拠した構成部品
 ハンド操作コントローラ
 自由設定ポジションメモリー機能、自動運転機能、リセットボタン
 フット操作コントローラ

バッテリーユニット

- 2個鉛ドライバッテリー
 環境に優しい、保守必要なし、カドミウム無
 2 x 12 V 7.2Ah
 - バックアップバッテリー交換簡単
 工具必要なし

バッテリーユニット

- 放電保護時の低周波シグナル音
- ユニバーサル蓄電器 入力: 100-240 V 出力: 24 V

バッテリー操作可能時間

- 準備、手術、リカバリー時間も含め 約 100 手術
- 総時間は1手術時間による

電動操作範囲

- 背もたれ、座位、脚部の角度変更と全体昇降
- 上記の逆の動作

その他仕様

- アームレスト、全ての部位のクッション(PUフォーム)着脱可能
- クッション着脱により、保守点検作業が容易

昇降

- 最大上昇	280 mm
- 最大患者泰淳	200 kg
- 可動モータ IP x 4 HAL センサー	ポジションメモリーあり

上部

- ヘッド、背もたれ、座部、脚部の4パート	
- 全長	1,930-2,180 mm

最大荷重 200 kg

重量 100 kg

一般医療機器 特定保守管理医療機器
 医療機器製造販売届番号: 13B2X10157000053

エレガントチェアーの設置例



Med Markus Pfeiffer 整形外科病院
ドイツ ミュンヘン



Krankenhaus St.Josef 病院
オーストリア ブラウナウ


エレガントチェアのカラーチャート



schwarz F6461195
Art.Nr.: 30370050



schoko F6461357
Art.Nr.: 30370060

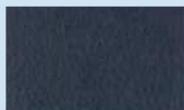

ocean F6461204
Art.Nr.: 30370055



apricot F6461458
Art.Nr.: 30370066



agave F6461273
Art.Nr.: 30370006



anthrazit F6461197
Art.Nr.: 30370052



bordeaux F6461350
Art.Nr.: 30370010



royal F6461196
Art.Nr.: 30370051



kirsche F6461199
Art.Nr.: 30370054



türkis F6461338
Art.Nr.: 30370008



chrom F6461205
Art.Nr.: 30370056



orchidee F6461354
Art.Nr.: 30370011



atoll F6461453
Art.Nr.: 30370062



feuer F6461454
Art.Nr.: 30370063



mais F6461457
Art.Nr.: 30370065



silber F6461550
Art.Nr.: 30370070



violett F6461356
Art.Nr.: 30370059



sky F6461581
Art.Nr.: 30370073



karneol F6461557
Art.Nr.: 30370072



limonade F6461343
Art.Nr.: 30370009



perle F6461288
Art.Nr.: 30370007



cyclame F6461381
Art.Nr.: 30370119



bleu F6461496
Art.Nr.: 30370068



orange F6461556
Art.Nr.: 30370071



limone F6461543
Art.Nr.: 30370109



weiss F6461198
Art.Nr.: 30370134



sand F6461230
Art.Nr.: 30370058



dolphin F6461609
Art.Nr.: 30370076



safran F6461542
Art.Nr.: 30370069



pistazio F6461610
Art.Nr.: 30370153



aqua F6461456
Art.Nr.: 30370001



creme F6461210
Art.Nr.: 30370057



beige F6461636
Art.Nr.: 30370094



stone F6461608
Art.Nr.: 30370075



mango F6461607
Art.Nr.: 30370074



smaragd F6461455
Art.Nr.: 30370064



mint F6461495
Art.Nr.: 30370067



注意: 色見本は実際の色とは若干の違って見える場合もあります。